

nxmdental.com




Designed
in USA



edgeF2

Sinteriza, Cristaliza y Glasea
En una sola máquina

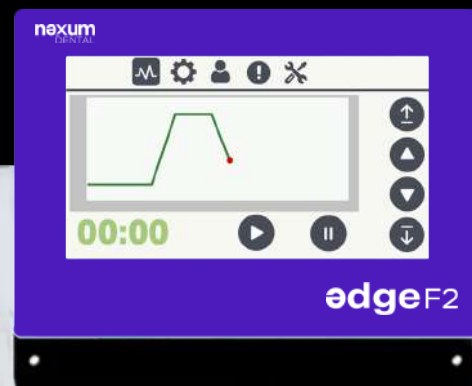



ABOUT THE BRAND

En Nexum Dental redefinimos el estándar en maquinaria e insumos dentales, transformando lo común en extraordinario. Nuestra sede combina innovación tecnológica con un compromiso absoluto hacia la excelencia, posicionándonos como un referente en el mercado dental premium.

Nos especializamos en importar y distribuir productos diseñados para laboratorios y clínicas dentales que buscan calidad excepcional, facilidad de uso y un enfoque disruptivo.

Inspirados por la necesidad de ofrecer soluciones accesibles sin comprometer la exclusividad, brindamos equipos avanzados y servicios posventa que marcan la diferencia.

Nuestra misión es clara: **simplificar procesos, superar expectativas y elevar la experiencia del cliente.**

En Nexum Dental impulsamos una nueva era de tecnología al servicio de la salud dental.


Ventajas



Espacio para colocar **3 bandejas de sinterización** en la cámara de sinterización grande




Utilizando varillas de *silicio-molib-deno* de la más pura calidad para generar calor, la sinterización es la más rápida, estable y precisa.

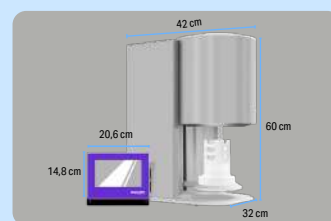

El horno es **más ligero y pequeño** gracias a su diseño avanzado.



Pantalla táctil completa para una operación más fácil

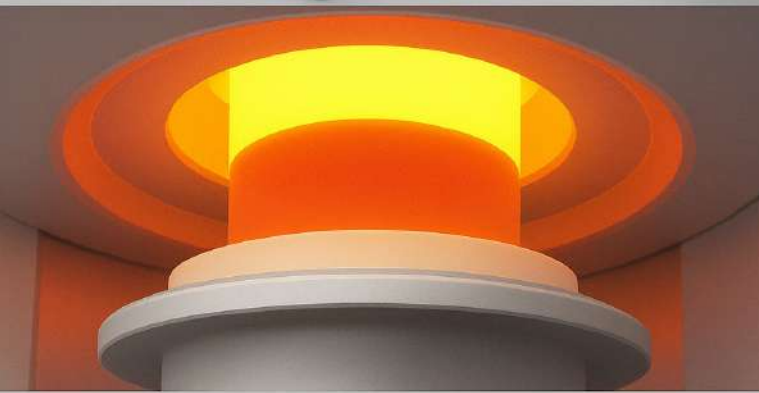

La tasa de calentamiento máxima puede alcanzar los 100°C por minuto lo que puede alcanzar una sinterización rápida y lenta



El horno de sinterización F2 tiene una precisión de temperatura excelente: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Parámetros del dispositivo

Tensión nominal	Interflow 220 VAC $\pm 20\%$
Potencia nominal	2500W
Precisión de control de temperatura	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Tamaño	-420 -320 -600mm
Peso neto	38.25 kg
Temperatura nominal	Temperatura máxima 1650°C
Tasa máxima de calentamiento	100°C/minute
Cámara de sinterización	100*200 mm, bandejas de sinterización de tres capas



Sinterización precisa,
resultados impecables.





Designed
in USA

nexum
DENTAL



+1 (650) 248-0653



info@nxmdental.com



@nexum_dental



@nxmdental

www.nxmdental.com